

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani elektromos készülék használatakor, különösen, ha gyermekek is jelen vannak. A készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni, a jelen használati utasításban leírtak szerint. Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!



FIGYELEM: A készüléket tartalmazó polietilén zacskók vagy a készülék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa távol ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől. Ne használja őket bölcsőben, gyermekágyban, babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia rátapadhat az orra és a szájra és meggátolhatja a légzést. A zacskó nem játékszer.



FIGYELEM: ne használja fürdőkád, zuhanyzó vagy egyéb vizet tartalmazó edény fölött vagy közelében. Tartsa szárazon a készüléket.

1. Ha a készüléket fürdőszobában használja, ügyeljen arra, hogy használat után kapcsolja ki. Vízforrás közelsége ugyanis még akkor is veszélyes lehet, ha a készülék ki van kapcsolva.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy sérülések nyomai láthatók rajta.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, sem kikapcsolt, sem bekapcsolt állapotban.
5. Kapcsolja ki azonnal, ha a használat közben probléma merül fel.
6. Csak a JimJams Beauty által ajánlott tartozékokat használja.
7. Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
8. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva 24 óránál tovább.
9. Ez a készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező, vagy tapasztalatlan vagy tudatlan személyek (vagy gyermekek) általi használatra készült, kivéve akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék használatára vonatkozó előzetes utasításait követve használják. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
10. Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, úgy távolítsa el az 1 db 1,5 V-os AA elemet a készülékből.
11. Ez a készülék megfelel a 04/108/EK (elektromágneses kompatibilitás) és a 04/108/EK (elektromos háztartási készülékek biztonsága) irányelvekben javasolt szabványoknak.

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉLETTARTAMUK VÉGÉN



Mindannyiunk és a környezet védelmében kifejtett közös aktív részvétel érdekében:

1. Ne dobja ki ezeket a termékeket a háztartási hulladékokkal együtt.
 2. Vegye igénybe a rendelkezésére álló visszavételi és begyűjtő helyeket.
- Egyes anyagok így újra feldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.

TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Mielőtt a készüléket hulladékba dobna, távolítsa el belőle az elemeket, akkumulátorokat és adja le őket egy az erre a célra kijelölt helyen. Ellenőrizze előtte, hogy az elemek és akkumulátorok teljesen le legyenek merülve. Az akkumulátorok és elemek eltávolításával kapcsolatos bármilyen tájékoztatásért forduljon a JimJams Beauty-hoz.

FONTOS!

- A JimJams Beauty Photonionic készüléket kizárólag csak ráncok kezelésére, valamint a bőrtisztításhoz és gyulladáscsökkentéshez alkalmazza a használati útmutatóban leírtak szerint.
- Ne végezzen Photonionic kezelést, nyílt seben, vágott seben, 3 hónapnál fiatalabb hegen, égési sérülésen, szemölcsön, vagy anyajegyen, napsgugárástól leégett vagy visszergyulladásos bőrön.
- Ne használja a készüléket irritált, vagy akut gyulladt bőrfelületen, mint például pikkelysömör, vagy ekcéma.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Minden kezelés után fertőtlenítsa a készülék fém kezelőfejét alkoholos oldattal. Ügyeljen arra, hogy a készülék a tisztítás során vízbe ne kerüljön.

A készülékház tisztításához enyhén tisztítószerral átitatott puha törlőkendőt használjon.

DOBOZ TARTALMA

JimJams Beauty Photonionic készülék - 1db

Elem: 1db 1,5V AA

JimJams Beauty Aloe Vita lift szérum 15ml - 1db

JIMJAMS BEAUTY VITA LIFT SZÉRUM 15 ml

Ingredients/Osszetevők:

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrolyzed Elastin, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Butylene Glycol, Glycine Soja Protein, Oxido Reductases, PVP, Glycine, Imidazolidinyl Urea, Phenethyl Alcohol, Phenoxethanol, Allantoin, Xanthan Gum, Lecithin, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, o-Cymen-5-ol.

Külsőleg! Legfeljebb 25°C-on, fénytől védve tárolandó.

Jótállási igényét a számlával érvényesítheti!

Szerviz elérhetőségei:

Alveola Kft. 1143 Budapest, Gizella út 28/A.

E-mail: szerviz@alveola.hu

Telefon: (06-1) 251-2270/83 mellék

Telefon: 06-20-212-7802

Szerviz nyitvatartása:

Hétfő, kedd, csütörtök: 09:00-16:30

Szerda, péntek: Zárva

Ref: JJ3032 JimJams Beauty Szemkörnyék-ránctalanító szett

Produced by / Gyártja: Alveola Ltd. / Kft.

H-1143 Budapest Gizella út 28/A.

JimJams Beauty Szérum: Made in Hungary / Származási hely: Magyarország

JimJams Beauty Szemkörnyék-ránctalanító készülék: Made in China / Származási hely: Kína

Jimjams[®]
beauty

Photonionic



JIMJAMS BEAUTY PHOTONIONIC
SZEMKÖRNYÉK-RÁNCTALANÍTÓ
KÉSZÜLÉK

RÁNCKEZELÉS ÉS BŐRFUNKCIÓK ÉLÉNKÍTÉSE

A JimJams Beauty Photonionic készüléke egyedülálló hármas hatással veszi fel a harcot a szem körüli ráncokkal szemben. A készülék által kibocsájtott piros fény és 660nm-es fényhullámhossz ideális a bőr sejteinek aktiválásához és azok mélyrétegi megújulásának fokozásához. Az élénkítő hatás egy negatív ionos anti-stressz hatással egészül ki, mely a készülék által kibocsájtott negatív töltéssel segíti a környezeti ártalmaktól meggyötört bőr egészséges állapotát helyreállítani. A két módszert szinergikusan erősíti a Photonionic készülék mikromasszázs hatása, mely mint egy piciny rezgő bőrvasáló segíti a mélyrétegi sejstimulációt és a ráncok kismulását.

BŐRTISZTÍTÁS ÉS PATTANÁSOK KEZELÉSE

A kék fény tisztítatlan bőre gyakorolt pozitív hatásai már régóta ismertek. A JimJams Beauty Photonionic készülék a gyulladt pattanásos bőrök kezelésében is hatékony társ tud lenni. Az eszköz lehetőséget biztosít egy 415 nm hullámhosszú fény spektrum kibocsátására, mely ideális a pattanások kialakulásáért felelős propionium baktérium ellen. A kék fény gátolja a fertőzések kialakulását, illetve tovább terjedését. A speciális fény spektrum hatását a kezelőfej által kibocsájtott pozitív töltés segíti, mely a pórusokban megülő szennyeződések fellazulását és könnyebb eltávolítását.

Piros fény bőre gyakorolt hatásai:

- Sejtfunkciók élénkítése
- Sejtek tápanyag és oxigén ellátásának elősegítése
- Sejtregeneráció

Kék fény bőre gyakorolt hatásai:

- Gyulladások mérséklése
- Pattanások kialakulásának csökkentése
- Bőr immunitás fenntartása

FIGYELMEZTETÉS!

A következő területeken és esetekben ne alkalmazza a készüléket:

- Gyulladásos folyamatok
- Lázás állapot
- Terhesség
- Fémbeültetések
- Fertőző bőrbetegségek a kezelendő területen
- Pacemaker (beépített szívritmus szabályzó)


KÉSZÜLÉK KICSIMAGOLÁSA

A készülék kicsomagolása előtt győződjön meg a doboz épségéről. A sérült doboz a készülék szállítás közbeni megsérülésére adhat okot, mely hibás működést eredményezhet. Ilyen esetben az első használat előtt mindenképpen győződjön meg a kezelőszervek helyes működéséről. Sérült készülékkel a használat megkezdése szigorúan TILOS!

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYZÉSE

A JimJams Beauty Photonionic készülék 1db 1,5V-os AA elemmel működik, melyet a gyári csomagolásban mellékelünk. A használat megkezdése előtt bontsa ki és a +- jelöléseknek megfelelően helyezze be az elemeket a készülék erre szolgáló aljzatába, majd gondosan rögzítse a kiesésüket gátló műanyag zárófedelel.


KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE

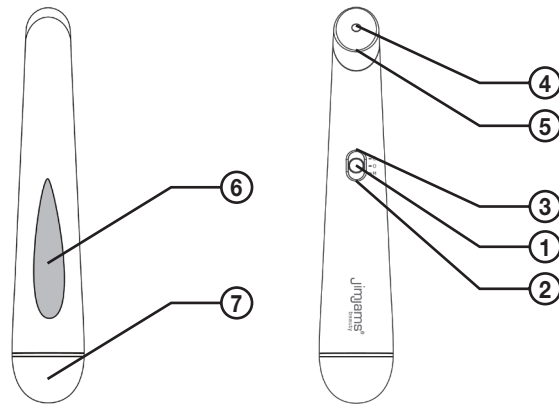

1. Funkció választó gomb, három állással
 - a. „0” kikapcsolt állapot
 - b. „C” CLEANSING
 - c. „M” MASSAGE INTENSE
2. „M” MASSAGE INTENSE ráncfeltöltő és kismító funkció
3. „C” CLEANSING bőrtisztító és gyulladáscsökkentő funkció
4. A kezelésekhöz használt kék és piros fény kibocsátására szolgáló LED
5. Pozitív és negatív ionos kezelőfej csúcs
6. A kezelés elindítására szolgáló érintő gomb
7. 1db 1,5V-os AA elem elhelyezésére szolgáló aljzat

A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE

- Vigye fel a kezeléshez használni kívánt szérumot a szemkörnyékre.
- Válassza ki az elvégzendő kezelést az 1-es gomb segítségével
- **Ráncfeltöltés és kismítés:** állítsa a készülék kapcsolóját „M” (MASSAGE INTENSE) pozícióba. A funkció elindításáról a kezelőfejen felgyulladó piros fény ad visszajelzést.
- **Bőrtisztítás és gyulladáscsökkentés:** állítsa a készülék kapcsolóját „C” (CLEANSING) pozícióba. A funkció elindításáról a kezelőfejen felgyulladó kék fény ad visszajelzést.
- Helyezze a készülék világító, fém kezelőfejét a bőrre, majd a mutatóujjával érintse meg az annak elindítására szolgáló 6-os érintő gombot. Megfelelő kezelőfej-bőr kontaktuskor a pulzáló mikromasszázs hatás azonnal elindul.

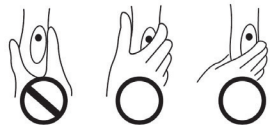

A képeknek megfelelően ügyeljen arra, hogy miután a kezelőfej fémes világító részét a bőrre helyezte, uja, vagy keze érintkezzen az eszköz fém érintő gombjával. Nem megfelelő kezelőfej-bőr kontaktus esetén a kezelés és a mikromasszázs nem indul el.

- A kezelés befejeztével engedje el a 6-os érintő gombot, majd vegye le a kezelőfejet a bőrről. Állítsa a bekapcsoló gombot „0” pozícióba. A kék és piros fények a készülék kikapcsolásával egy időben kialszanak.
- Amennyiben a készüléket nem kapcsolja ki, úgy az 3 percen belül automatikusan leáll, melyet a kék és piros fények automatikus kikapcsolása jelez.

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS TECHNIKÁK

Ráncfeltöltés és kismítés

A szem környékén és az arcon található finomabb ráncok hatóanyagokkal történő feltöltéséhez, illetve a ráncok kismítéséhez körkörös mozdulatokkal kezelje az arc teljes területét. Lassú mozdulatokkal haladjon a szem alatti területekről a halánték irányába felfelé és ismétlje meg azokat többször. A homlok és az arc területén a szemkörnyékhez hasonlóan körkörös mozdulatokkal kezelje arcbőrét, minden esetben alulról felfelé haladva.

Bőrtisztítás és gyulladáscsökkentés

Az arcon található gyulladások mérsékléséhez, pattanások kezeléséhez, illetve a bőrön felhalmozódó szennyeződések fellazításához a nyirokutaknak megfelelően masszírozza át az arc teljes felületét. Minden esetben haladjon az arc középvonalától kifelé a fülek irányába egyenes vonalban. Ezzel a technikával a nyirokutaknak megfelelő masszázst végezhető, mely a nyirokfolyadék áramlási sebességének növelésével elősegíti a felhalmozódó mérge- és salakanyagok kiürülését.

KEZELÉS LÉPÉSEI

1. Tisztítsa meg a bőrét a sminktől és a szennyeződésektől a JimJams Beauty Habzó lemosó géllal (szett nem tartalmazza).
2. A megtisztított szemkörnyéken végezzen finom masszírozást a kék fényvel. Kapcsolja be a készülék kék fényét és a rajzon megadott irányban végezzen 2 perces masszázst.
3. Oszlasson el a szemkörnyéken 1 csepp (szemenként) JimJams Beauty Aloe Vita Lift szérumot, és masszírozza be a készülék segítségével 2 perc alatt vörös fény használatával, a rajzon megadott irány betartásával.
4. A kezelés végeztével hidratálja bőrét mogorónyi JimJams Beauty Nappali krémrel. (szett nem tartalmazza)

KEZELÉSI IRÁNYOK



RÁNCKEZELÉS ÉS BŐRFUNKCIÓK ÉLÉNKÍTÉSE (PIROS FÉNNYEL)



BŐRTISZTÍTÁS ÉS PATTANÁSOK KEZELÉSE (KÉK FÉNNYEL)